



REHASENSE



HEAVY DUTY



SERVER HD

HEAVY DUTY ROLLATOR

Die Heavy-Duty Version der Server-Rollatoren Serie von Rehasense. Mit einem Gewicht von weniger als 8 kg, kann der verstärkte Server HD mit besonders breitem Rahmen bis zu 200 kg tragen.

SERVER HD

HEAVY DUTY ROLLATOR



REHASENSE

KLAPPBAR UND EINFACH ZU TRAGEN

Server HD ist einfach zusammenzuklappen und bleibt in geklappter Position dank dem einfachen Verschlussystem mit Doppelfunktion eines ergonomisch gestalteten Tragegriffes.

STABIL UND BESTÄNDIG

Der Rahmen und Sitz wurden getestet und für maximales Benutzergewicht von 200 kg zugelassen. Der Bremsmechanismus ist leicht aber positiv. Bruchfeste Räder, mit TPE bedeckt.

HÖHENVERSTELLBAR


Server HD Schiebegriffe sind höhenverstellbar in 10 Positionen, von 74 cm bis 102 cm. Die Sitzhöhe ist 62 cm mit besonders breiter Sitzgrundlage von 55 cm. Optimales Rahmendesign und ergonomische Schiebegriffe garantieren den Benutzerkomfort.

ZUBEHÖR

Server HD kann mit einer reichen Auswahl an Rehasense-Zubehör ausgestattet werden.



Stufenlos höhenverstellbare Griffe und feststellbare Handbremse.

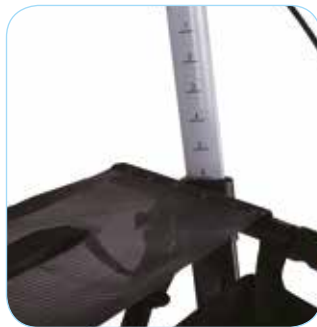

Sitzhöhe: 62, 55, 50 cm.



Wartungsfreie Bremsen und TPE-beschichtete bruchfeste Räder.



Einzigartige, verstärkte dreieckige Profile und zusätzliche Verstärkung der Querstange garantieren die Unterstützung eines Gewichts bis zu 200 kg.



Bleibt fest geschlossen dank dem Verschluss und ist dank einem Druckknopf einfach zu öffnen.



Praktische Einkaufstasche, die einfach zu entnehmen ist, dank leicht anwendbaren Klipsen mit speziellem Design.

TECHNISCHE DATEN

Max. Benutzergewicht: 200 kg

Bestellnummer:

Large HRSGL600

Medium HRSGM550

Größe:

(Breite x Tiefe x Höhe)

Groß 69 x 68 x 74–102 cm

Mittel 69 x 68 x 66–86 cm

Sitzbreite: 55 cm

Größe zum Transport,

Wenn zusammengeklappt:

(Tiefe x Höhe x Breite)

Groß 68 x 86 x 22,5 cm

Mittel 68 x 79 x 22,5 cm

Gewicht:

Groß Von 7,9 kg.

Mittel Von 7,6 kg.

Einkaufstasche Maße:

(Breite x Tiefe x Höhe)

35 x 17 x 25 cm

Füllgewicht: 5 kg.

Farbe:

Graphit

Rehasense® Europe

Rehasense Sp. z o.o.

Sulejowska 45

97-300 Piotrków Trybunalski

Poland

Rehasense Benelux

Markeweg 81

8398 GM Blesdijke

Netherlands

Rehasense Deutschland

Briener Strasse 25

47533 Kleve

Deutschland



Sitzbreite 55 cm.

SERVER HD ist CE-gemarkt und entspricht den Anforderungen der EU-Richtlinie 93/42 EWG über Medizinprodukte

Copyright © Rehasense® 2015